




Contour[®] plus ONE[»]

Blood Glucose
Monitoring System

Using the
smartLIGHT™ feature on the
CONTOUR®PLUS ONE
smart meter

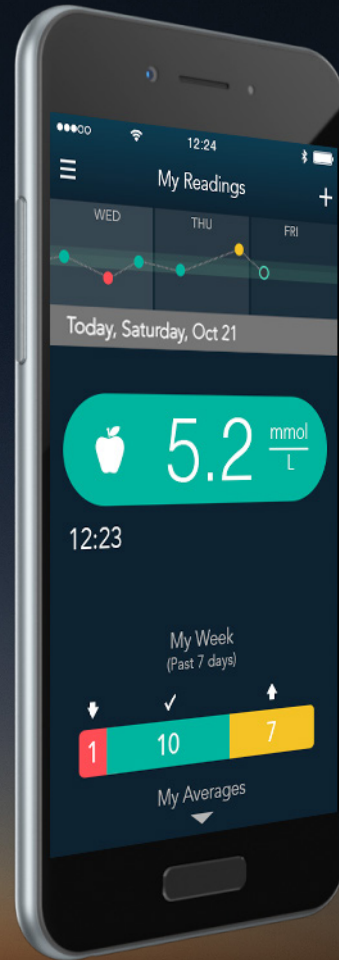


Always consult with your healthcare provider prior to making changes to treatment, diet or exercise.

© Copyright 2017 Ascensia Diabetes Care Holdings AG

Contour®
plus ONE»
Blood Glucose
Monitoring System


diabetes.ascensia.com

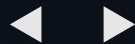

The **smartLIGHT** feature gives you instant feedback on your blood glucose readings.



Contour[®]
plus **ONE**[®]
Blood Glucose
Monitoring System

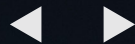


1.

smartLIGHT Feature

After you have monitored your blood glucose and if the Target Light setting is on, the test strip port light displays a color representing your reading value compared to the Before Meal, After Meal, or Overall Target Range.



Contour[®]
plus ONE[»]
Blood Glucose
Monitoring System

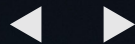

2.


smartLIGHT Feature

If your blood glucose reading is in target, the smartLIGHT feature is green and the meter beeps.

In Target



Contour[®]
plus **ONE**_»
Blood Glucose
Monitoring System

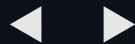

3.


smartLIGHT Feature

If your blood glucose reading is below target, the smartLIGHT feature is red and the meter beeps.

Below Target



Contour[®]
plus ONE[»]
Blood Glucose
Monitoring System

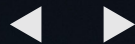

4.


smartLIGHT Feature

If your blood glucose reading is above target, the smartLIGHT feature is yellow and the meter beeps.

Above Target



Contour[®]
plus ONE[»]
Blood Glucose
Monitoring System

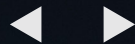

5.

smartLIGHT Feature

If you have not selected a Meal Marker, the smartLIGHT feature will indicate your blood glucose test reading compared to your Overall Target Range.



Contour[®]
plus ONE[»]
Blood Glucose
Monitoring System

如果您对 **CONTOUR®PLUS ONE** 智能测量仪或 **CONTOUR™ DIABETES** 应用有任何疑问，请咨询您的医疗保健专业人员或查阅产品用户指南。

若需更多信息，或了解在您的所在国家/地区是否销售这些产品，请访问 diabetes.ascensia.com。



假设的患者数据，仅用于演示目的。
更改治疗、饮食或锻炼之前，请务必咨询您的医疗保健提供商。



Apple 和 Apple 标志是 Apple Inc. 在美国和其他国家的注册商标。App Store 是 Apple Inc. 的服务标记。Bluetooth 单词标记和标志是 Bluetooth SIG, Inc. 拥有的注册商标，此处的所有标记使用均已得到许可。Google play 和 Google Play 标志是 Google Inc. 的商标。

Ascensia、Ascensia Diabetes Care 标志和 Contour 是 Ascensia Diabetes Care Holdings AG 的商标和/或注册商标。

编写日期：2018 年 2 月 代码：G.DC.12.2017.52593



**Contour[®]
plus ONE[™]**
Blood Glucose
Monitoring System

diabetes.ascensia.com



Contour[®]

diabetes solutions