


The logo for the Contour Plus ONE Blood Glucose Monitoring System. The word "Contour" is in white, "plus" is in white, and "ONE" is in a bold, teal color with a double-stroke effect. Below "plus ONE" is the text "Blood Glucose Monitoring System" in a smaller white font.

Contour[®] plus ONE[»]

Blood Glucose
Monitoring System

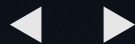

在CONTOUR™ DIABETES 应用中使用我的模式



更改治疗、饮食或锻炼之前，请务必咨询您的医疗保健提供商。



Contour[®]
plus ONE[®]
Blood Glucose
Monitoring System

我的模式功能可识别血糖读数中的特定模式和趋势，并告诉您背后的可能原因。



**Contour[®]
plus ONE[™]**
Blood Glucose
Monitoring System

我的模式功能可识别血糖读数中的特定模式和趋势，并告诉您背后的可能原因。



Contour[®]
plus ONE[®]
Blood Glucose
Monitoring System

1. 我的模式

从“主菜单”选择“我的模式”



**Contour[®]
plus ONE[®]**
Blood Glucose
Monitoring System

2. 我的模式

我的模式屏幕将显示您要求提醒的模式。

未阅读的模式标记紫色圆圈。



Contour[®]
plus ONE[»]
Blood Glucose
Monitoring System

2. 我的模式

按**更多**更改模式选择或查看模式历史。



Contour[®]
plus **ONE**
Blood Glucose
Monitoring System

3. 我的模式

按**模式选择**选择要提醒哪种模式。



Contour[®]
plus **ONE**
Blood Glucose
Monitoring System

3.

我的模式

按**模式选择**选择要提醒哪种模式。



Contour[®]
plus **ONE**
Blood Glucose
Monitoring System

3.

我的模式

按**模式选择**选择要提醒哪种模式。



Contour[®]
plus **ONE**
Blood Glucose
Monitoring System

4.

我的模式

检测到的所有模式都会显示在**我的模式**屏幕中。

我的模式屏幕将显示您要求提醒的模式。未阅读的模式标记紫色圆圈。



Contour[®]
plus **ONE**
Blood Glucose
Monitoring System

4. 我的模式

您可看到模式详情并了解更多可能的原因。



Contour[®]
plus ONE[»]
Blood Glucose
Monitoring System

4. 我的模式


您可以了解更多可能导致此模式的原因，并选择可能的原因，如食物、药物或活动等。



**Contour[®]
plus ONE[»]**
Blood Glucose
Monitoring System

4. 我的模式

您还可以设置与可能原因相关的提醒。

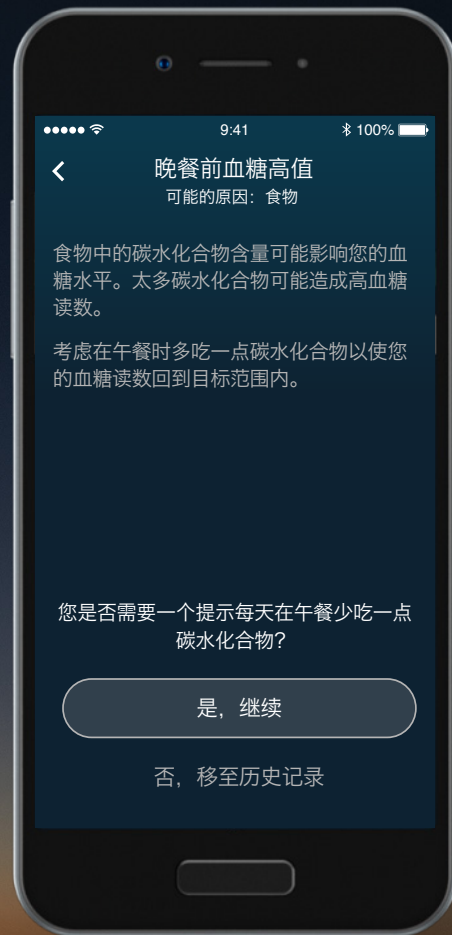

Contour[®]
plus **ONE**
Blood Glucose
Monitoring System

5. 我的模式

您可随时返回**模式历史**中的某个模式。



Contour[®]
plus **ONE**
Blood Glucose
Monitoring System

5. 我的模式

在**模式历史**中，您可查看过去检测到的已经无效的模式。



Contour[®]
plus **ONE**
Blood Glucose
Monitoring System

5. 我的模式

在**模式历史**中，您可查看过去检测到的已经无效的模式。



Contour[®]
plus **ONE**
Blood Glucose
Monitoring System

如果您对 **CONTOUR®PLUS ONE** 智能测量仪或 **CONTOUR™ DIABETES** 应用有任何疑问，请咨询您的医疗保健专业人员或查阅产品用户指南。

若需更多信息，或了解在您的所在国家/地区是否销售这些产品，请访问 diabetes.ascensia.com。



假设的患者数据，仅用于演示目的。
更改治疗、饮食或锻炼之前，请务必咨询您的医疗保健提供商。



Apple 和 Apple 标志是 Apple Inc. 在美国和其他国家的注册商标。App Store 是 Apple Inc. 的服务标记。Bluetooth 单词标记和标志是 Bluetooth SIG, Inc. 拥有的注册商标，此处的所有标记使用均已得到许可。Google play 和 Google Play 标志是 Google Inc. 的商标。

Ascensia、Ascensia Diabetes Care 标志和 Contour 是 Ascensia Diabetes Care Holdings AG 的商标和/或注册商标。

编写日期：2018 年 2 月 代码：G.DC.12.2017.52578



**Contour®
plus ONE™**
Blood Glucose
Monitoring System

