



Contour[®] plus ONE[»]

Sistem Pemantauan
Glukosa Darah

Meninjau pola gula darah dengan **aplikasi** **CONTOUR™ DIABETES**




Sentiasa berunding dengan penyedia penjagaan kesihatan anda sebelum membuat perubahan kepada rawatan, diet atau senaman.



Contour
plus ONE
Sistem Pemantauan
Glukosa Darah


Ciri **My Patterns** (Pola Saya) mengenal pasti pola dan trend khusus dalam bacaan glukosa darah dan memaklumkan anda tentang punca yang mungkin menyebabkannya.

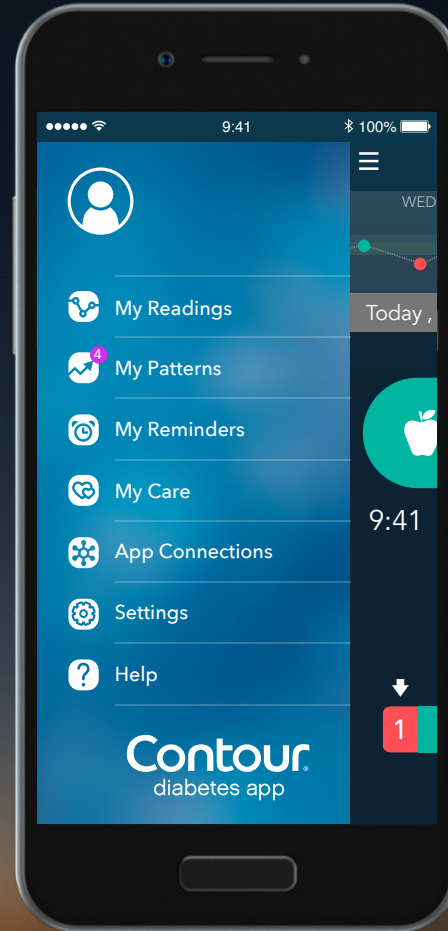

Contour[®]
plus ONE[»]
Sistem Pemantauan
Glukosa Darah

1. Patterns

Apabila **aplikasi CONTOUR DIABETES** mengesan pola tertentu, anda akan menerima mesej '**New Pattern Detected**' (Pola Baru Dikesan).

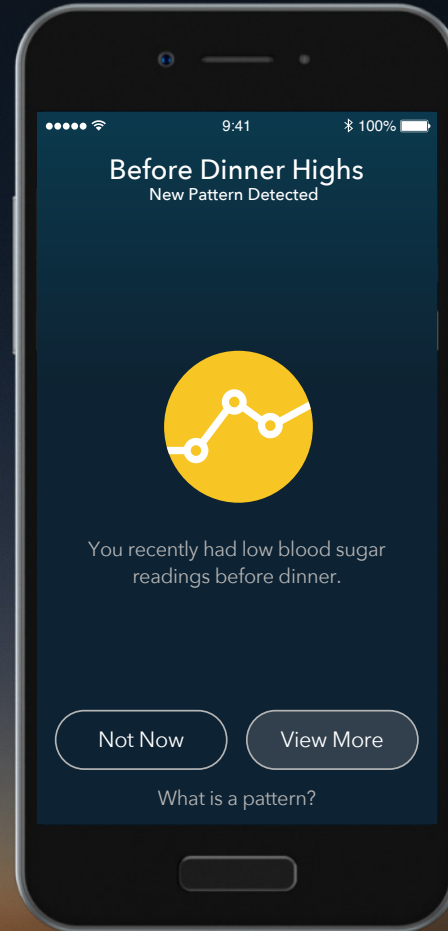


**Contour
plus ONE**
Sistem Pemantauan
Glukosa Darah

1. Patterns

Apabila **aplikasi CONTOUR DIABETES** mengesan pola tertentu, anda akan menerima mesej '**New Pattern Detected**' (Pola Baru Dikesan).

Tekan View More untuk mengetahui lebih lanjut tentang pola.

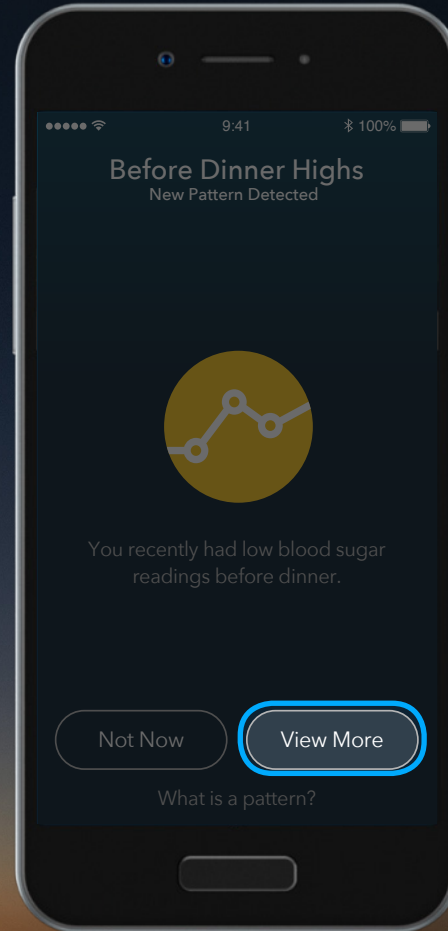


**Contour
plus ONE**
Sistem Pemantauan
Glukosa Darah

2.

Patterns

Pola **Recent Highs** (Paras Tertinggi Terkini) memberitahu anda bahawa 3 bacaan gula anda yang lalu melebihi julat sasaran.

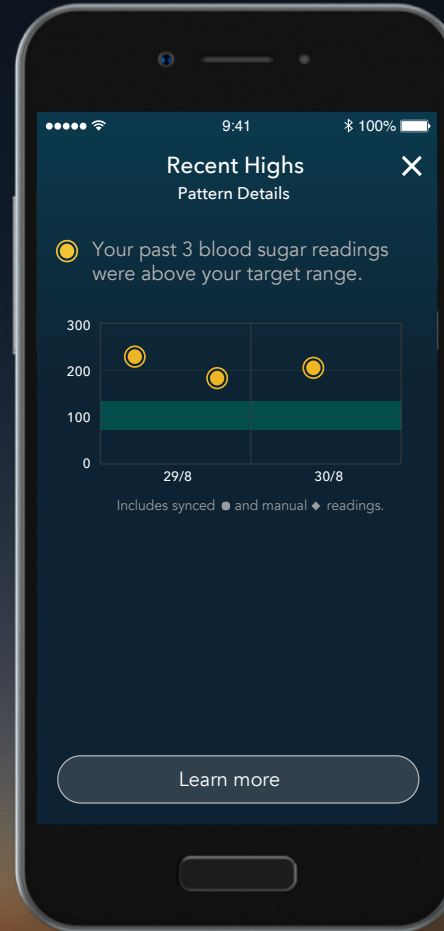

Contour[®]
plus **ONE**
Sistem Pemantauan
Glukosa Darah

2.

Patterns

Pola **Recent Highs** (Paras Tertinggi Terkini) memberitahu anda bahawa 3 bacaan gula anda yang lalu melebihi julat sasaran.


Tekan **Learn More** untuk maklumat lanjut tentang punca yang mungkin menyebabkannya.



Contour
plus ONE
Sistem Pemantauan
Glukosa Darah

3. Patterns


Jika anda tahu punca bacaan gula darah tinggi, anda boleh membuat pilihan di sini.

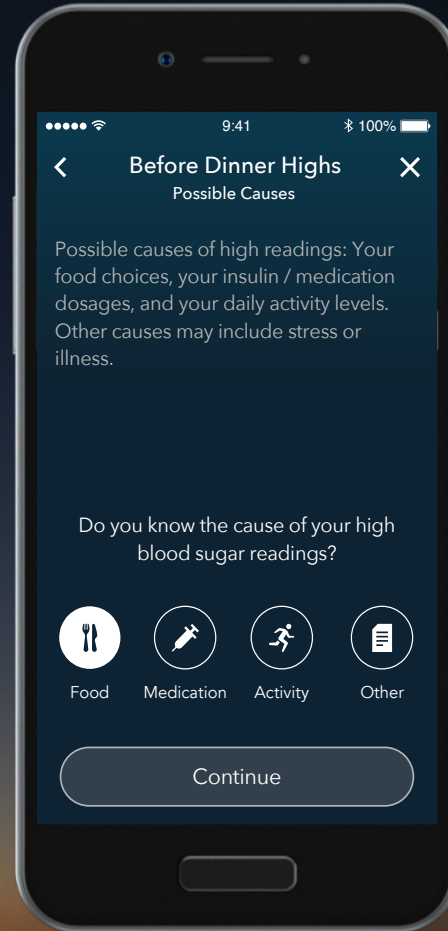

**Contour[®]
plus ONE[»]**
Sistem Pemantauan
Glukosa Darah

3. Patterns

Jika anda tahu punca bacaan gula darah tinggi, anda boleh membuat pilihan di sini.

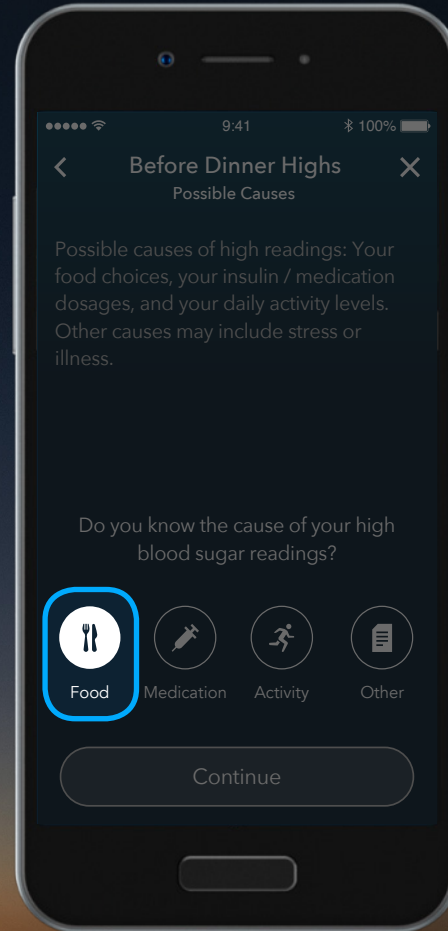


**Contour[®]
plus ONE[»]**
Sistem Pemantauan
Glukosa Darah

4.

My Patterns

Aplikasi CONTOUR DIABETES menyediakan maklumat tertentu tentang punca yang mungkin menyebabkan pola ini.

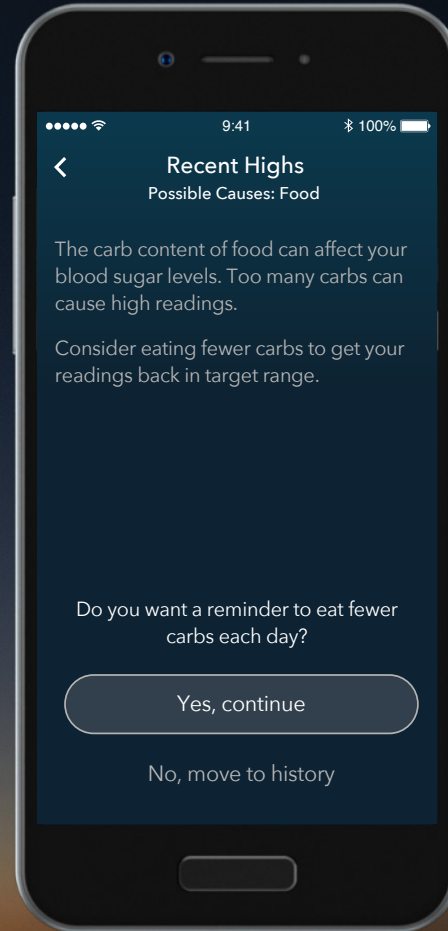

**Contour[®]
plus ONE[»]**
Sistem Pemantauan
Glukosa Darah


4.

My Patterns

Aplikasi CONTOUR DIABETES

menyediakan maklumat tertentu tentang punca yang mungkin menyebabkan pola ini.


Tekan **Yes, continue** untuk menetapkan peringatan agar mengurangkan pengambilan karbohidrat setiap hari.

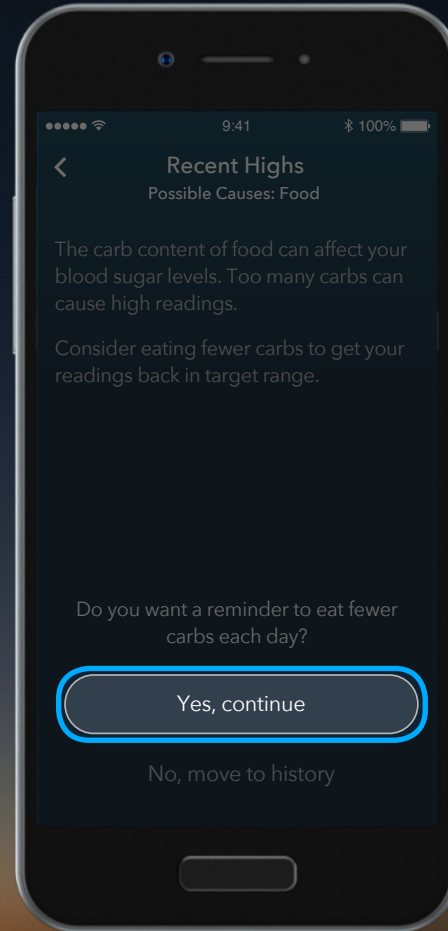

**Contour[®]
plus ONE[»]**
Sistem Pemantauan
Glukosa Darah

5. My Patterns

Gunakan putaran masa yang dipaparkan untuk memilih masa menerima peringatan agar mengurangkan pengambilan karbohidrat setiap hari.

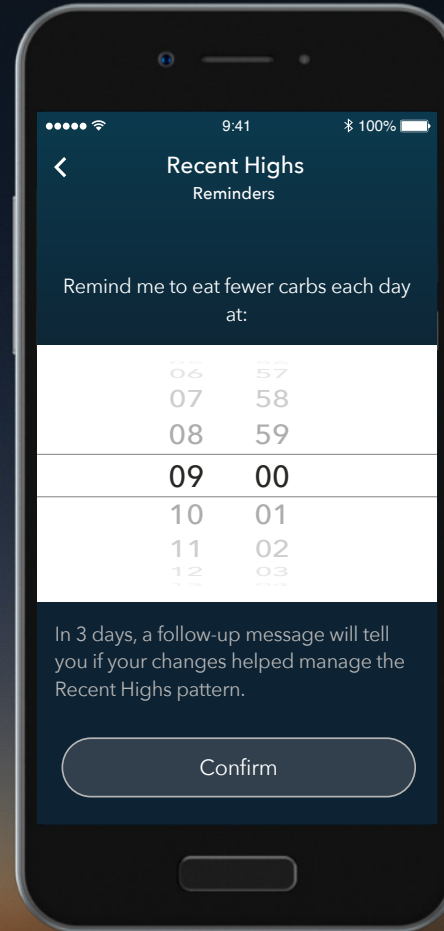


**Contour[®]
plus ONE[»]**
Sistem Pemantauan
Glukosa Darah

5. My Patterns


Gunakan putaran masa yang dipaparkan untuk memilih masa menerima peringatan agar mengurangkan pengambilan karbohidrat setiap hari.

Tekan **Confirm** untuk menetapkan masa.

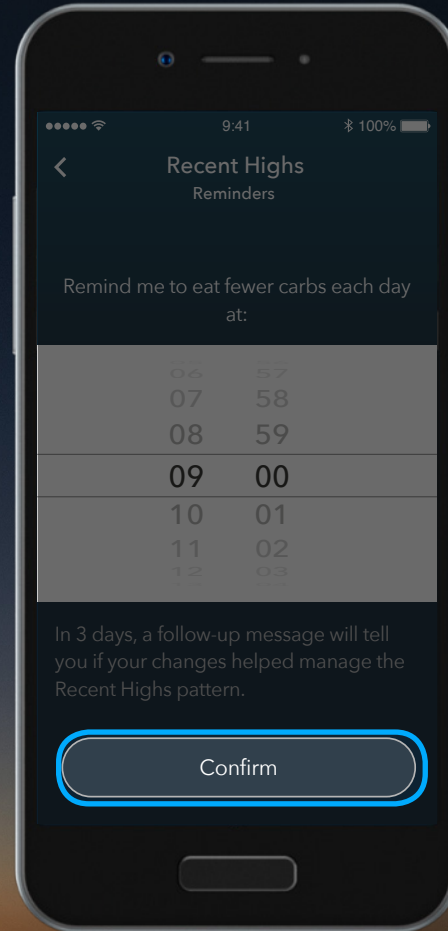

6. Patterns


Pada masa pilihan anda,
peringatan akan dipaparkan.

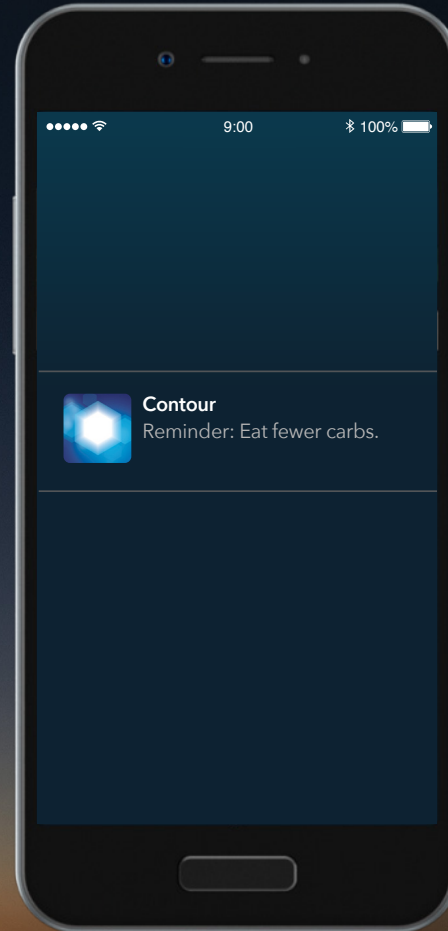

Contour[®]
plus ONE[»]
Sistem Pemantauan
Glukosa Darah

6. Patterns


Pada masa pilihan anda,
peringatan akan dipaparkan.

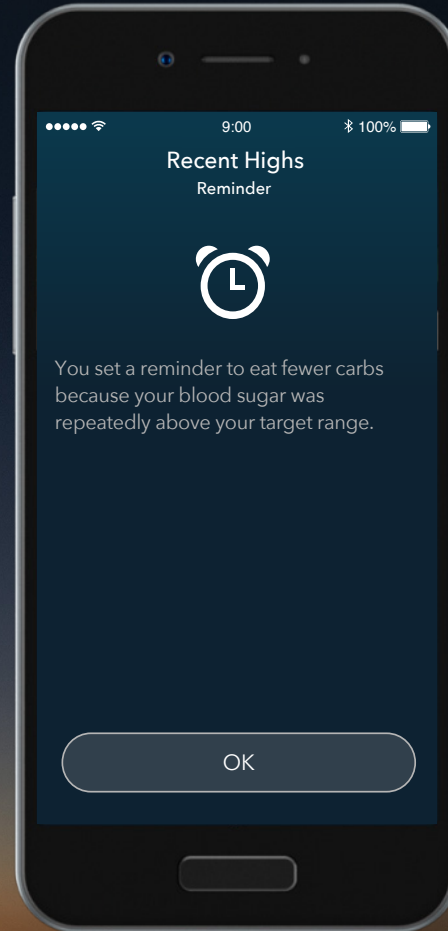

**Contour[®]
plus ONE[»]**
Sistem Pemantauan
Glukosa Darah

7. My Patterns

Dalam masa 3 hari, mesej susulan akan memberitahu anda jika perubahan anda membantu mengubah pola bacaan **Recent High** tersebut.

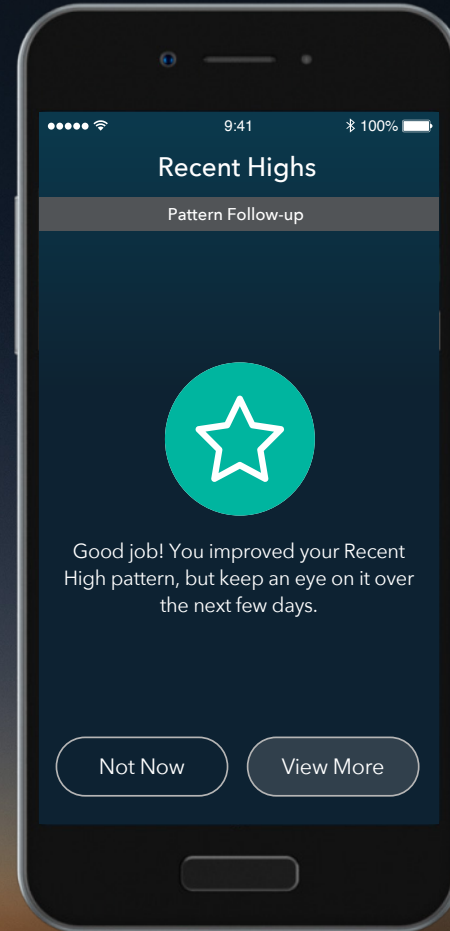


**Contour[®]
plus ONE[»]**
Sistem Pemantauan
Glukosa Darah

7. My Patterns

Dalam masa 3 hari, mesej susulan akan memberitahu anda jika perubahan anda membantu mengubah pola bacaan **Recent High** tersebut.

Tekan **View More** untuk maklumat lanjut.

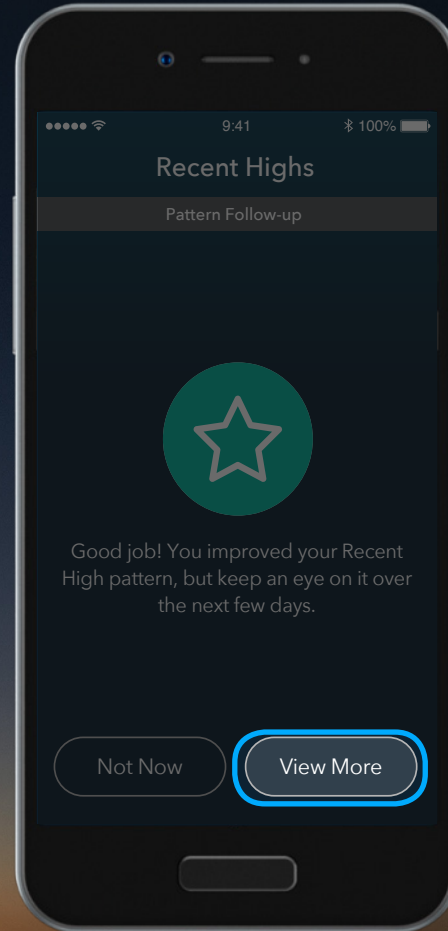

**Contour[®]
plus ONE[»]**
Sistem Pemantauan
Glukosa Darah


7. Patterns

Pola ini telah dipindahkan ke history (sejarah) anda dan boleh dilihat pada bila-bila masa dengan memilih **My patterns** (pola saya) dari **Main Menu** (Menu Utama).



8. Patterns


Pada bila-bila masa, anda boleh menyemak pola anda dalam **Pattern History** (Sejarah Pola) untuk mencatatkan nota tambahan tentang faktor yang mungkin menyebabkan pola ini, bagi membantu anda dalam temu janji masa depan anda dengan profesional penjagaan kesihatan.

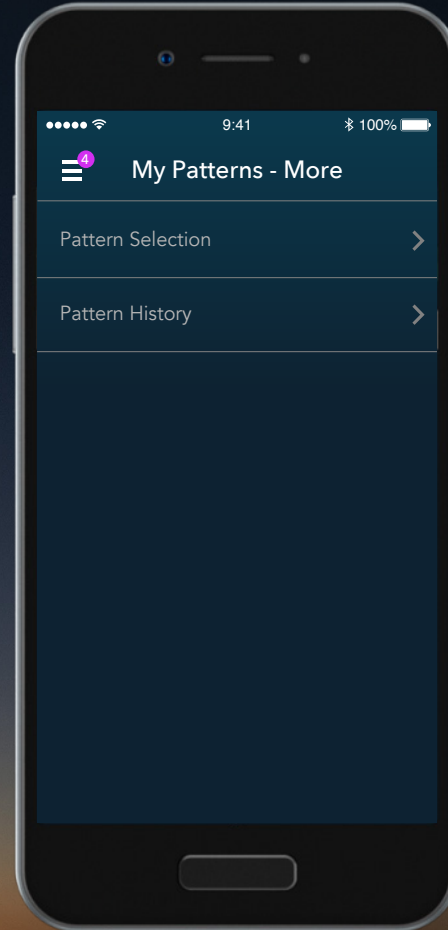

Contour
plus ONE
Sistem Pemantauan
Glukosa Darah

8. Patterns

Pada bila-bila masa, anda boleh menyemak pola anda dalam **Pattern History** (Sejarah Pola) untuk mencatatkan nota tambahan tentang faktor yang mungkin menyebabkan pola ini, bagi membantu anda dalam temu janji masa depan anda dengan profesional penjagaan kesihatan.

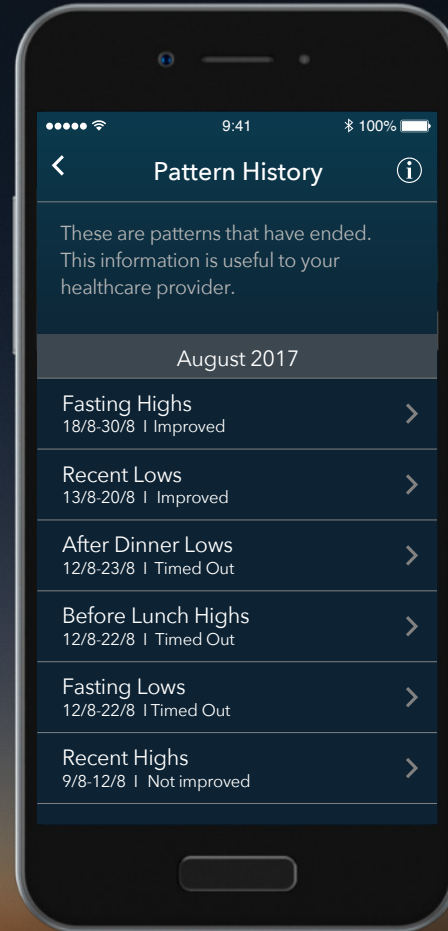

**Contour[®]
plus ONE[»]**
Sistem Pemantauan
Glukosa Darah

Dapatkan nasihat dari pihak Profesional Penjagaan Kesihatan dan rujuk kepada panduan pengguna produk jika anda mempunyai apa-apa soalan tentang meter pintar **CONTOUR®PLUS ONE** dan **aplikasi CONTOUR™ DIABETES**.

Untuk maklumat lanjut, dan untuk mengetahui sama ada produk ini boleh didapati di negara anda, kunjungi **diabetes.ascensia.com**



Data pesakit yang dipaparkan adalah sebagai gambaran sahaja.

Sentiasa berunding dengan penyedia perkhidmatan kesihatan anda sebelum membuat perubahan kepada rawatan, diet atau senaman.



Apple dan logo Apple ialah tanda dagangan Apple Inc., yang berdaftar di Amerika Syarikat dan negara-negara lain. App Store ialah tanda perkhidmatan Apple Inc. Tanda perkataan dan logo Bluetooth ialah tanda dagangan berdaftar yang dimiliki oleh Bluetooth SIG, Inc., dan sebarang penggunaan tanda sedemikian di dalam ini adalah di bawah lesen. Google Play dan logo Google Play ialah tanda dagangan Google Inc.

Ascensia, logo Ascensia Diabetes Care dan Contour ialah tanda dagangan dan/atau tanda dagangan berdaftar Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

Tarikh penyediaan: Februari 2018 kod: G.DC. 10.2017.52579

Hak Cipta 2017 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Hak cipta terpelihara.



**Contour
plus ONE**
Sistem Pemantauan
Glukosa Darah

diabetes.ascensia.com



Contour[®]

Diabetes Solutions